



NexxZr® Shine

Účinné leštění.
Přirozený lesk.

Účinné leštění.
Přirozený lesk.

NexxZr® Shine



NexxZr® Shine je dvoustupňový diamantový leštící systém pro efektivní leštění zubní keramiky, např. oxidu zirkoničitého, oxidu hlinitého, lithium disilikátu nebo sklokeramiky.

Rozměrově stabilní, diamantem impregnované gumové nástroje vás přesvědčí svým jednoduchým a efektivním používáním. Navíc mají dlouhou životnost a poskytují přirozeně působící lesk. NexxZr Shine vytváří homogenní povrch nejen na

monolitických náhradách, ale i na fazetovaných a částečně fazetovaných náhradách. Pro optimální leštění různých struktur a povrchů se dodávají tři tvary: Turn 18, Twist 17 a Tip 5. Tyto tvary jsou dostupné ve dvou hrubostech 1. smooth vyhlazení (předleštění) a 2. gloss vyleštění, vysoký lesk. Sadu doplňuje univerzální diamantová leštící pasta NexxZr Shine Paste. Tím se odstraní mikroškrábance a po leštění zůstává zrcadlově hladký, vysoce lesklý povrch.

Technické údaje



Typ
Dvoustupňový
diamantový leštící
systém



Materiál
Gumové
diamantem
impregnované
nástroje



Hrubost
smooth, gloss



Vhodné na
všechny keramiky



3 tvary, 1 pasta
Turn 18, Twist 17,
Tip 5, pasta

1

Dvoustupňový proces leštění

Jednoduché a efektivní použití na všechny keramiky

Stupeň 1
předleštění



Hrubost:
smooth



Vzhled:
hedvábný lesk



Stupeň 2
vyleštění
do vysokého
lesku



Hrubost:
gloss



Vzhled:
vysoký lesk



2

Rozměrově stálé, diamantem impregnované gumové nástroje

Přirozený efekt vyleštění, dlouhá životnost



Zrcadlově hladký, přirozeně
působící výsledek leštění

3

Tři přizpůsobené tvary a jedna pasta


Optimální vyleštění bez ohledu na strukturu nebo povrch



Turn 18
na plochy



Twist 17
na plochy
a fisury

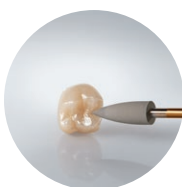

Tip 5
na plochy
a fisury



Paste
na plochy
a fisury



Balení



Sada

NexxZr Shine Starter Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine Polishing Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.



Doplňovací sada

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com