



NexxZr® Shine

Skuteczne polerowanie.
Naturalny połysk.

Skuteczne polerowanie.
Naturalny połysk.

NexxZr® Shine



NexxZr® Shine to dwustopniowy diamentowy system do skutecznego polerowania materiałów ceramicznych stosowanych w stomatologii: np. tlenku cyrkonu, tlenku glinu, dwukrzemianu litu lub ceramiki szklanej.

Stabilne wymiarowo gumki do polerowania nasycone diamentami przekonują użytkowników łatwą i wydajną aplikacją. Dodatkowo mają długą żywotność i zapewniają naturalny połysk. NexxZr Shine tworzy jednorodną powierzchnię zarówno

na uzupełnieniach monolitycznych jak i częściowo licowanych. Istnieją trzy dopasowane kształty do optymalnego polerowania różnych struktur: Turn 18, Twist 17 i Tip 5. Kształty są dostępne w dwóch granulacjach: smooth (etap 1, polerowanie wstępne) i gloss (etap 2, polerowanie na wysoki połysk). Asortyment uzupełnia uniwersalna diamentowa pasta polerska NexxZr Shine Paste. Usuwa mikrorysy i pozostawia gładką jak szkło powierzchnię o wysokim połysku.

Dane techniczne



Typ
Dwustopniowy
diamentowy system
polerski



Materiał
Wysadzane
diamentami gumki
polerskie



Granulacje
smooth, gloss



Do
wszystkich rodzajów
ceramiki



3 kształty, 1 pasta
Turn 18, Twist 17,
Tip 5, pasta

1 Dwustopniowy diamentowy system polerski

Proste w użyciu i skuteczne na wszelkiego rodzaju materiałach ceramicznych

Stopień 1
Polerowanie
wstępne



Granulacja:
smooth



Efekt:
jedwabisty połysk



Stopień 2
Polerowanie
na wysoki
połysk



Granulacja:
gloss



Efekt:
wysoki połysk



2 Diamentowe gumki polerskie zachowujące wymiary

Naturalny połysk i wysoka trwałość



Gładkie jak lustro powierzchnie
o naturalnym połysku

3 Trzy specjalnie dostosowane kształty i jedna pasta


Doskonałe rezultaty polerowania, niezależnie od struktury i powierzchni



Turn 18
do płaszczyzn



Twist 17
do płaszczyzn
i szczelin

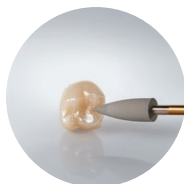

Tip 5
do płaszczyzn
i szczelin



Paste
do płaszczyzn
i szczelin



Forma dostawy



Zestawy

NexxZr Shine Starter Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine Polishing Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.



Elementy wymienne

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com