



NexxZr® Shine

Эффективная полировка.
Естественный блеск.

Эффективная полировка.
Естественный блеск.

NexxZr® Shine



NexxZr. Shine представляет собой двухступенчатую систему для эффективной алмазной полировки стоматологических керамических материалов, например оксида циркония, оксида алюминия, дисиликата лития или стеклокерамики.

Стабильные по размеру резиновые полиры с алмазной крошкой отличаются простотой и эффективностью применения. Кроме того, они имеют длительный срок службы и позволяют придать реставрации естественный блеск. NexxZr Shine используется для получения однородной поверхности как в случае

с монолитными, полностью облицованными, так и частично облицованными реставрациями. Для оптимальной полировки различных структур и поверхностей предусмотрены три специально разработанные формы: Turn 18, Twist 17 и Tip 5. Доступны формы с различной степенью абразивности: smooth (уровень 1, предварительная полировка) и gloss (уровень 2, зеркальная полировка). В линейку продукции также входит универсальная алмазная полировальная паста NexxZr Shine Paste. Она удаляет микроцарапины и позволяет получить зеркальную глянцевую поверхность.

Технические данные



Тип
Двухступенчатая
алмазная
полировальная
система



Материал
Резиновый полир с
алмазной крошкой



**Степень
абразивности**
smooth, gloss



**Область
применения**
все керамические
материалы



3 формы, 1 паста
Turn 18, Twist 17,
Tip 5, паста

1 Двухступенчатая система алмазной полировки

Простота и эффективность применения на любых керамических материалах

		Степень абразивности: smooth	Внешний вид: шелковистый блеск
Уровень 1 Предварительная полировка			
Уровень 2 Зеркальная полировка			
		Степень абразивности: gloss	Внешний вид: зеркальный блеск


2 Стабильные по размеру резиновые полиры с алмазной крошкой

Обеспечение естественного блеска при длительном сроке службы



3 Три специально разработанные формы и одна паста

Оптимальные результаты полировки вне зависимости от структуры и поверхности

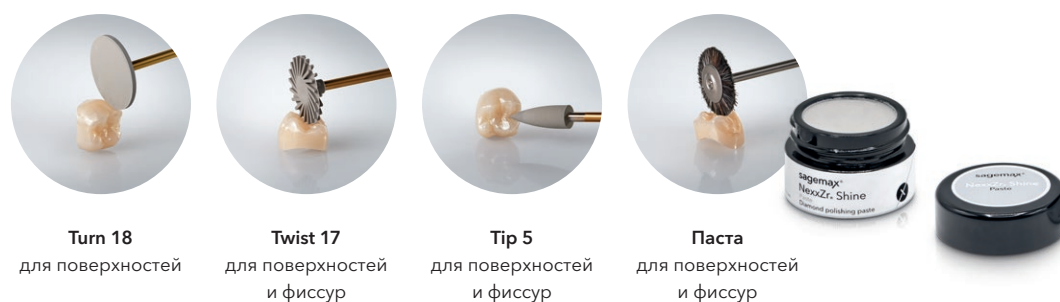

Формы поставки



Набор

NexxZr Shine Starter Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine Polishing Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.



Пополнение

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com