




NexxZr® Shine

Etkili polisaj.
Doğal parlaklık.

Etkili polisaj.
Doğal parlaklık.

NexxZr® Shine

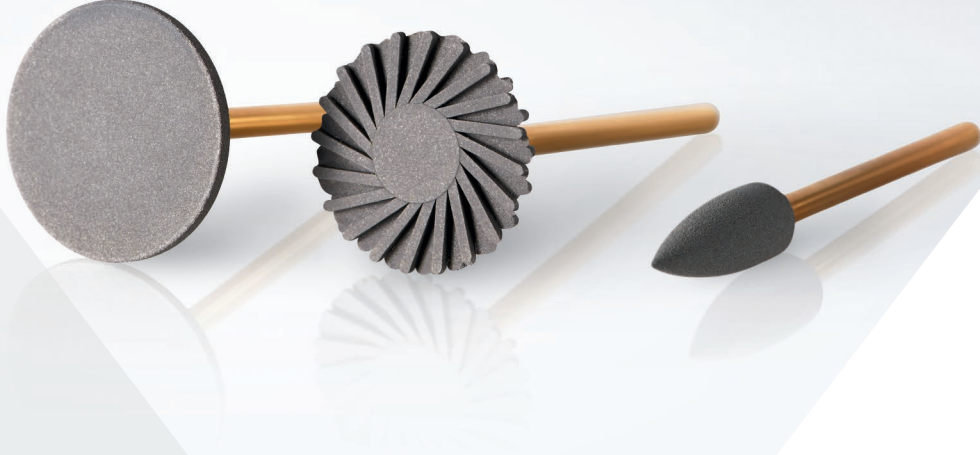

NexxZr® Shine, zirkonyum oksit, alüminyum oksit, lityum disilikat veya cam seramik gibi dental seramiklerin etkili bir şekilde parlatılmasında kullanılan iki aşamalı bir elmas polisaj sistemidir.

Stabil boyutlu, elmas içerikli silikon cila lastikleri kolay ve etkili kullanımlarıyla dikkati çekerler. Ayrıca uzun kullanım ömrü ve doğal görünümlü parlak bir sonuç sunarlar. NexxZr Shine, hem monolitik kaplanmış hem kısmi kaplanmış restorasyonlar

için homojen bir yüzey oluşturur. Farklı yapıların ve yüzeylerin en iyi şekilde parlatılması için üç uygun form sunulmaktadır: Turn 18, Twist 17 ve Tip 5. Formlar, smooth (1. Aşama, ön polisaj) ve gloss (2. Aşama, parlak polisaj) granül büyüklükleriyle mevcuttur. Set, genel amaçlı olarak uygulanabilen elmas parlatma pastası NexxZr Shine Paste ile tamamlanmaktadır. Bu, mikro çizikleri giderir ve ayna gibi pürüzsüz ve çok parlak bir yüzey elde etmenizi sağlar.

Teknik veriler



Tip
İki aşamalı elmas
polisaj sistemi



Materyal
Elmas içerikli
silikon cila lastiği



Granül
smooth, gloss



Uygun
tüm seramikler için



3 form, 1 pasta
Turn 18, Twist 17,
Tip 5, pasta

1

İki aşamalı elmas polisaj sistemi

Tüm seramiklerde basit ve etkili uygulama

1. Aşama
Ön polisaj

Granül:
smooth

Görünüm:
saten görünüm

2. Aşama
Yüksek parlaklıkta polisaj

Granül:
gloss

Görünüm:
yüksek parlaklık



2

Stabil boyutlu, elmas içerikli silikon cila lastiği

Uzun kullanım ömrüyle doğal görünümlü parlak sonuç



3

Üç uygun form ve bir pasta

Yapı ve yüzeyden bağımsız olarak optimum polisaj sonuçları



Teslimat formları



Kit

**NexxZr Shine
Starter Kit**

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.
Paste 20 g / 1pcs.

**NexxZr Shine
Polishing Kit**

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.



Refill

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com