



NexxZr.T Multi

Estética multifuncional.
Indicaciones multiples.

Estética multifuncional.

Indicaciones múltiples.

NexxZr® T Multi



NexxZr® T Multi es un óxido de circonio multicapa para uso dental (3Y-TZP cervical, 5Y-TZP incisal) de última generación.

La combinación de una resistencia a la flexión muy elevada (1200 MPa cervical, 650 MPa incisal) y el suave gradiente de color y translucidez marca la diferencia. Esta combinación ofrece las condiciones óptimas para la fabricación de restauraciones monolíticas o anatómicamente reducidas de una sola pieza o de puentes de varias piezas. El concepto multifuncional especialmente desarrollado cambia las propiedades mecánicas y ópticas del material en un gradiente suave de la región cervical a la región incisal. El proceso de producción de alta calidad proporciona una sinterización sin tensión y una alta precisión de ajuste incluso con restauraciones de gran envergadura.

Datos técnicos



Tipo
5Y-TZP (incisal)
3Y-TZP (cervical)



Resistencia a la flexión
650 MPa (incisal)
1200 MPa (cervical)



Translucidez
49 % (incisal)
41 % (cervical)




Indicaciones
Restauraciones unitarias hasta puentes de varias piezas




Técnicas de procesamiento
Técnica de infiltración
Técnica de maquillaje
Técnica de cut-back

Destacados

1 Gradiente suave de color y translucidez Estética multifuncional

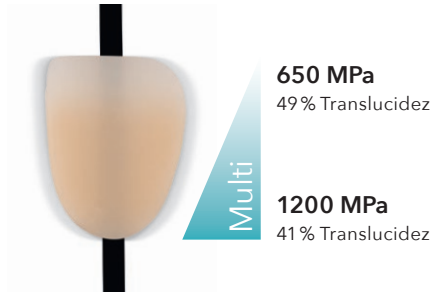

Translucidez media

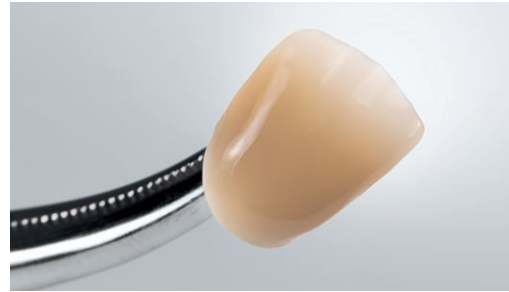

Suave degradado de color y de translucidez

2 Alta resistencia Gran variedad de indicaciones



Restauraciones unitarias hasta puentes de varias piezas - todo con el mismo material

3 Proceso de producción de alta calidad Sinterización sin tensión ni distorsión y alta precisión de ajuste




Alta precisión de ajuste, incluso para restauraciones de alta envergadura




Fabricación por prensado isostático en frío (CIP)

Concepto multicapa

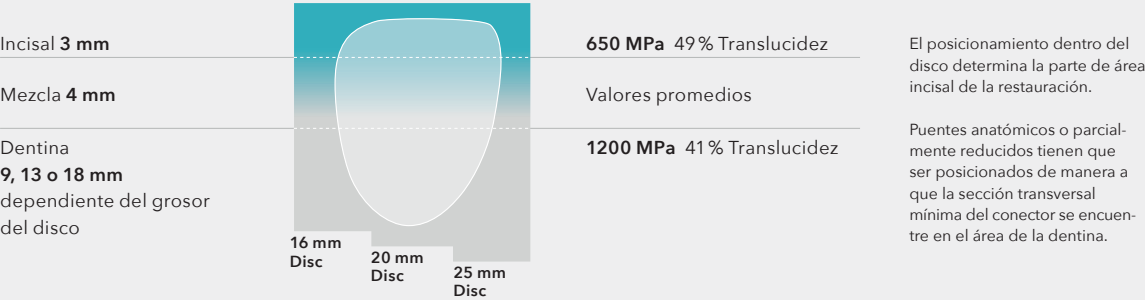

Programa de sinterizado

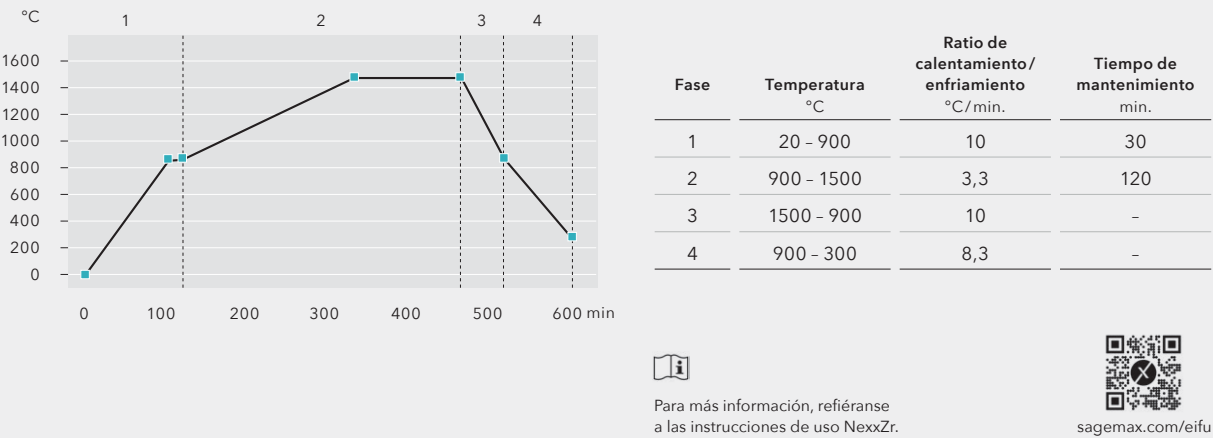

Formas de suministro

Geometrías	Espesores	Colores
W-98, Z-95	16, 20, 25 mm	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com