



NexxZr.T

Транслюцентность.
Высокая прочность.

Транслюцентность.
Высокая прочность.

NexxZr® T



NexxZr® T - это стоматологический оксид циркония (3Y-TZP) с очень высокой прочностью на изгиб (1270 МПа) и средней транслюцентностью (42 %).

Эта комбинация обеспечивает максимальное разнообразие показаний для изготовления монолитных, а также анатомически редуцированных однозубых и мостовидных реставраций. Мягкие свойства материала заготовок положительно влияют на срок службы фрез и обеспечивают легкое сепарирование и постобработку. Благодаря этим свойствам NexxZr T экономит средства лабораторий. Проверенные свойства материала были неоднократно отмечены призом «Dental Advisor» за долгосрочный срок службы в категории эстетического оксида циркония.

Технические данные



Тип
3Y-TZP



Прочность
на изгиб
1270 МПа



Прозрачность
42 %



Показания
Реставрации от
одного зуба до
многоэлементных
мостов



Технологии
обработки
Инфильтрация
Окрашивании
Редуцирование (катбэк)
Облицовка

Преимущества

1 Очень высокая прочность в сочетании со средней транслюцентностью Максимальное разнообразие показаний



Средняя транслюцентность



Эстетические результаты при максимальном разнообразии показаний

2 Приз Dental Advisor Проверенное многолетнее качество

Награждён призом за:

Естественный вид

Благодаря своей высокой транслюцентности, NexxZr T выглядит естественно и в то же время очень эстетично.

Твёрдость

В долгосрочном исследовании Dental Advisor за 3 года практически не наблюдалось износа.



Источник: © The Dental Advisor


3 Мягкие свойства материала заготовок Высокая эффективность и экономичность



Легкое сепарирование и очень хорошая обрабатываемость



Оптимизированные свойства материала для длительного срока службы фрез

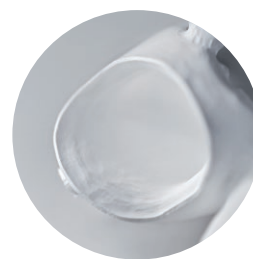

Отличные результаты фрезерования и острые края

Программы спекания

	Количество единиц	Продолжительность	Фаза	Температура	Скорость нагрева / охлаждения	Время выдержки
		часов		°C	°C/мин.	мин.
Стандартный режим	1-5	~ 3,7	1	20-1300	30	30
			2	1300-1530	40	60
			3	1530-900	15	-
			4	900-80	20	-
	5-10	~ 5,2	1	20-1300	30	60
			2	1300-1530	40	120
			3	1530-900	15	-
			4	900-80	20	-
Длинный режим	1-20	~ 10,7	1	20-900	10	10
			2	900-1530	3	150
			3	1530-80	8	-
	> 21	~ 11,7	1	20-900	10	10
			2	900-1530	3	210
			3	1530-80	8	-
Ночной режим	неограниченное количество единиц	~ 14,3	1	20-250	2	-
			2	250-1530	4	240
			3	1530-80	8	-



Более подробную информацию Вы можете найти в Инструкции по применению NexxZr.



sagemax.com/eifu

Формы поставки

Геометрия
W-98, Z-95

Высота
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 мм

Оттенки
Белый, OM1, OM2, OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com