

sagemax.com

sagemax®



PressCeramic

高強度二矽酸鋰。
各種透明度選擇。

高強度二矽酸鋰。
各種透明度選擇。

PressCeramic



是二矽酸鋰玻璃陶瓷錠，用於傳統壓鑄技術，
製作高度美學的全瓷贗復物。

高抗彎強度 (470Mpa) 可用於廣泛的適應症，並作為第二小臼齒之前三單位牙橋的可靠選項。根據適應症和加工方式，壓鑄瓷錠有 4 種不同的透明度等級 (MO、LT、MT、HT) 和 2 種乳光效果等級。得益於優異的流動性，能夠實現高強度的薄貼片。仿真的乳光和透明度提供了與鄰牙齒結構的最佳整合和“變色龍效應”。

技術參數



類型
二矽酸鋰玻璃陶瓷
(LS2)



抗彎強度
470Mpa
典型平均值



透明度
Opal、HT、MT、LT、MO




適應症
最多 3 單位牙橋的
貼片 (最多至第二小
臼齒)



加工技術
染色技術
回切技術
分層技術

特點

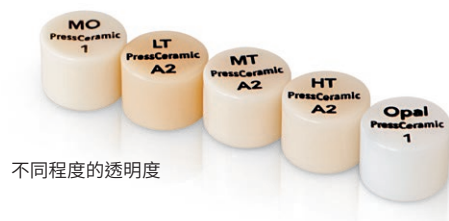

不同程度的透明度

1 高抗彎強度和不同的透明度 廣泛的適應症, 從薄貼片到三單位牙橋



廣泛的適應症

2 仿真的乳光效果和透明度 與相鄰牙齒結構的最佳整合: “變色龍效應”



自然乳光效果和透明度



變色龍效應

3 出色的流動性 能實現高強度薄貼片



可製作難以壓鑄的幾何形狀型態



優異的壓鑄效果

透明度概念

	Opal	HT	MT	LT	MO
		高透明度	中透明度	低透明度	中度不透明
加工工藝					
染色技術	●	●	●	●	
回切技術	●	●	●	●	
堆築技術					●
適應症					
咬合面貼片 ¹	●	●	●		
薄貼片 ¹	●	●	●		
貼片	●	●	●	●	
鑲體		●			
嵌體		●			
部分冠		●	●	●	
前/後牙冠			●	●	●
三單位牙橋 ²			●	●	●
混合支台齒			●	●	●
混合支台齒牙冠			●	●	

1 回切技術不得用於製造薄貼片和咬合貼片
2 作為遠心支台齒僅適用至第二小白齒

交貨形式

填充包裝	透明度	顏色
4 顆瓷錠, 每顆 3 克	Opal	1, 2
	HT	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
	MT	BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2
	LT	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
	MO	0, 1, 2, 3, 4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com