




Wax Disc

Encerado digital.
Inyección y colado.

Encerado digital.
Inyección y colado.

Wax Disc

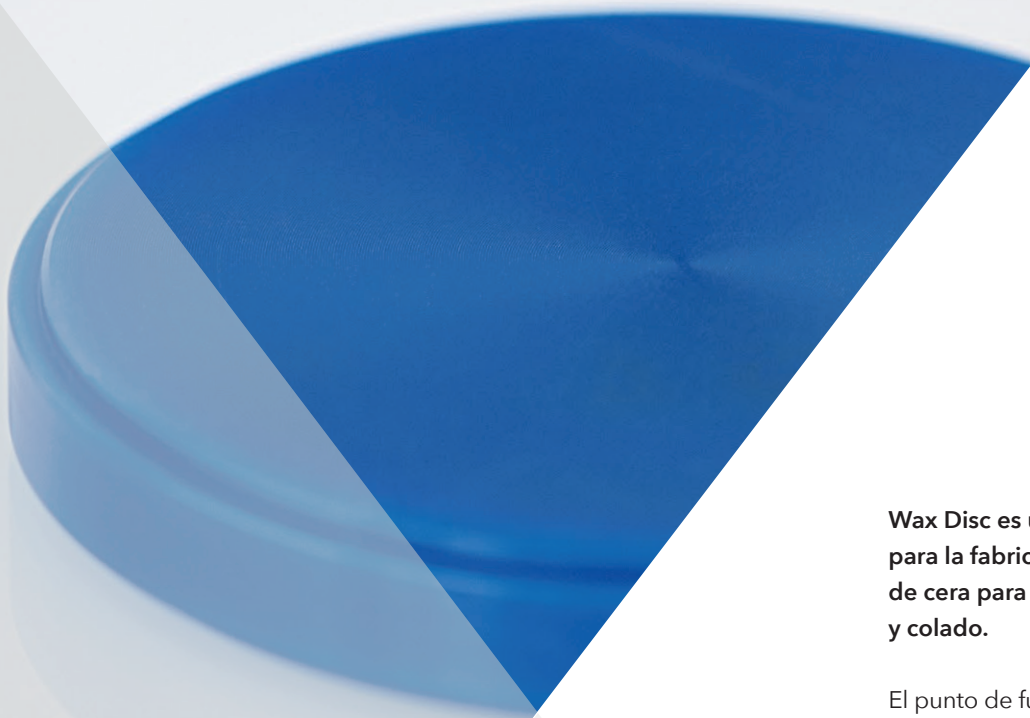

Wax Disc es un disco de cera sintética para la fabricación CAD/CAM de objetos de cera para las técnicas de inyección y colado.

El punto de fusión óptimo de 100-120°C confiere al material excelentes propiedades de mecanizado y permite posteriores ajustes manuales o complementos. Las restauraciones fresadas muestran muy buena estabilidad de forma, calidad y precisión de ajuste y se quema sin dejar residuos. Los resultados son objetos lisos, de gran precisión, inyectados y colados.

Datos técnicos



Material
Cera sintética



Cualidad de fresado
Excelente



Quemado
Sin residuos




Indicado para
Tecnología de
inyección y de colado



Punto de fusión
100 - 120 °C

Destacados

1 Buenas propiedades de mecanizado y estabilidad de forma Muy buena calidad de superficie y precisión de ajuste

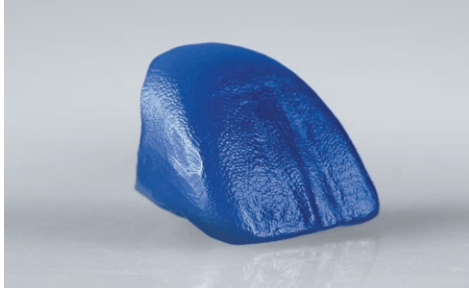

Excelente cualidad de superficie



Excelente capacidad de fresado

2 Cocción sin dejar residuos durante el proceso de precalentamiento Resultados de inyección y colado suaves y de ajuste preciso




Se quema sin residuos



Resultados de inyección y colado suaves y de ajuste preciso



3 Punto de fusión óptimo Posibilidad de retoques y adiciones posteriores

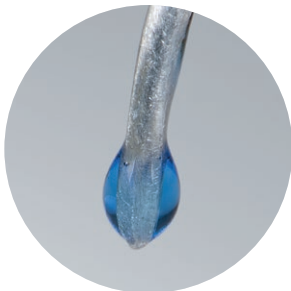

Punto de fusión 100 - 120 °C



Posibilidad de retoques y adiciones posteriores



Formas de suministro

Geometrías
W-98, Z-95

Espesores
10, 14, 16, 20, 25 mm

Colores
Azul



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com