


Wax Disc

Dijital mumlama.
Baskı ve döküm.

Dijital mumlama.
Baskı ve döküm.

Wax Disc

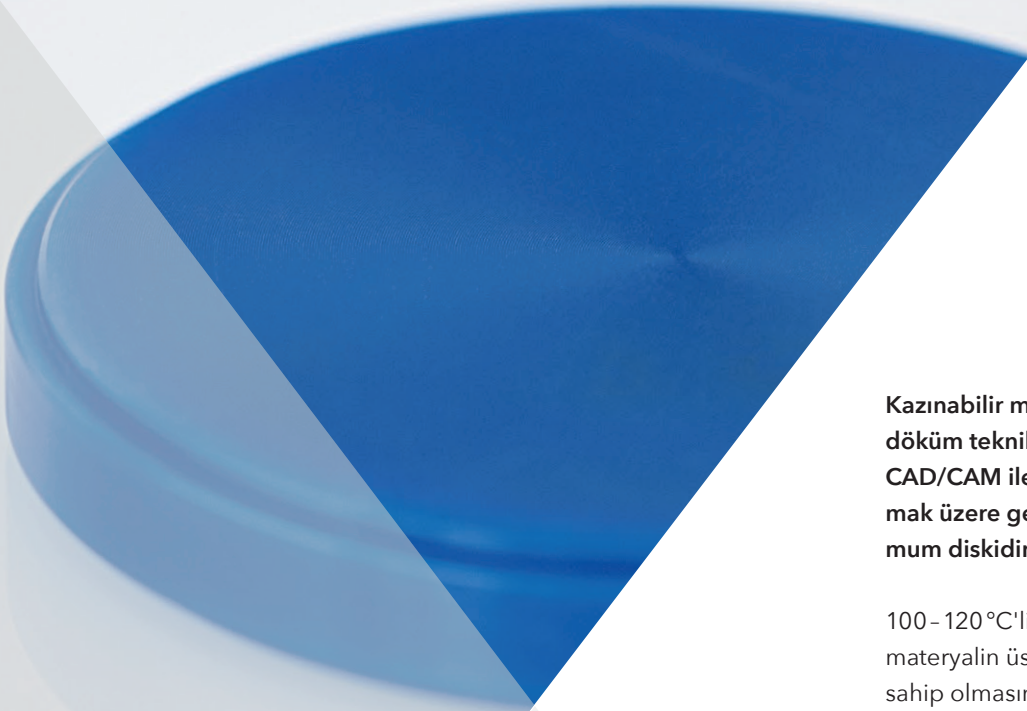

Kazınabilir mum disk, presleme ve döküm teknikleri için mum nesnelerin CAD/CAM ile oluşturulmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir sentetik mum diskidir.

100 - 120 °C'lik optimum erime noktası, materyalin üstün işleme özelliklerine sahip olmasını sağlamakla birlikte, daha sonradan manuel olarak düzenleme veya ekleme yapılmasına olanak tanır. Kazınmış restorasyonlar oldukça iyi bir şekil stabilitesi, yüzey kalitesi ve uyum doğruluğu sergiler ve ön ısıtma sürecinde kalıntı bırakmadan pişirilebilir. Sonuç olarak pürüzsüz, doğru şekilde uyan basılı ve döküm nesneler elde edilir.

Teknik veriler



Materyal
Sentetik mum



Kazınabilirlik
Mükemmel



Yanıcılık
Kalıntı bırakmaz




Pres ve döküm teknolojisi
İçin uygundur



Erime noktası
100 - 120 °C

1

İyi işleme özellikleri ve şekil stabilitesi
Çok iyi yüzey kalitesi ve uyum doğruluğu

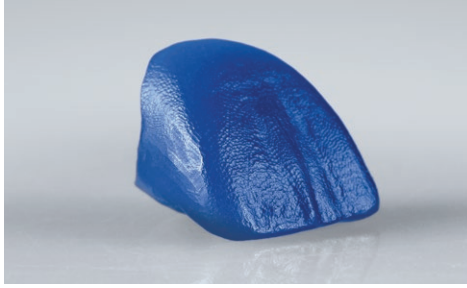

Mükemmel yüzey kalitesi



Mükemmel kazınabilirlik

2

Ön ısıtma sürecinde kalıntı bırakmadan pişirilebilir
Pürüzsüz, doğru şekilde uyan baskı ve döküm sonuçları



Kalıntısız yakma




Pürüzsüz, doğru şekilde uyan baskı ve döküm sonuçları



3

Optimum erime noktası
Daha sonradan düzenleme ve ekleme yapılabilir

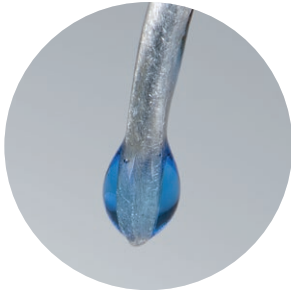

Erime noktası: 100 - 120 °C



Daha sonradan düzenleme ve ekleme yapılabilir



Teslimat formları

Geometri
W-98, Z-95

Kalınlıklar
10, 14, 16, 20, 25 mm

Renkler
Mavi



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com