




Wax Disc

數位蠟型。
壓鑄&鑄造。

數位蠟型。
壓鑄&鑄造。

Wax Disc

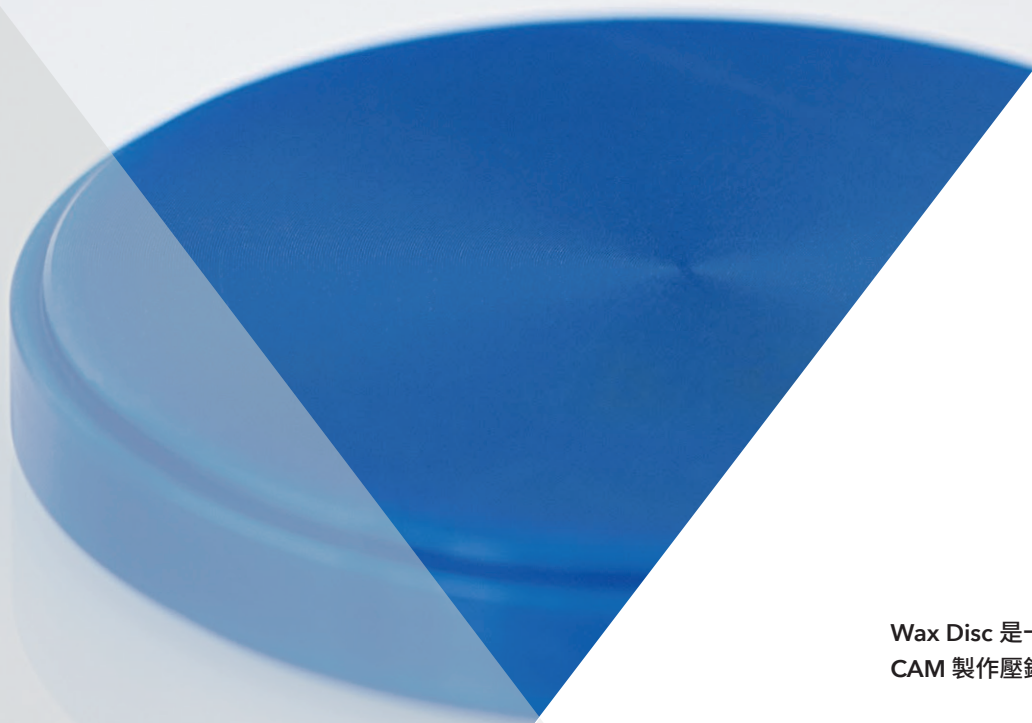

Wax Disc 是一種合成蠟盤,用於 CAD/CAM 製作壓鑄和鑄造的蠟型。

100-120°C 的最佳熔點賦予材料出色的加工特性,並允許隨後的手工調整或。車削的膺復體在預熱過程揮發表現出非常好的形狀穩定性、表面品質和準確性,不會留下殘留物。壓鑄和鑄造體的成品平滑且精準。

技術參數



類型
合成蠟



研磨性
優秀



揮發
無殘留




適用於
壓鑄及鑄造技術



熔點
100 - 120 °C

亮點

1 良好的加工性能和形狀穩定性 非常好的表面品質和精準度

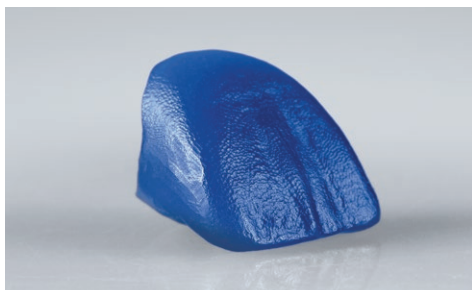

出色的表面品質



優良的研磨性

2 在預熱過程揮發不殘留 平滑、準確地符合壓鑄和鑄造結果




揮發無殘留



平滑、準確地符合壓鑄和鑄造結果



3 最佳化的熔點 可進行後續調整

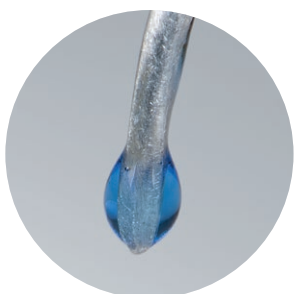

熔點 100 - 120 °C



可進行後續調整



交貨形式

形狀規格
W-98, Z-95

厚度
10, 14, 16, 20, 25 mm

顏色
藍色



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com