

sagemax.com

sagemax®



NexxZr® Tool U

精準車削。  
適用多種材料。

精準車削。  
適用多種材料。

# NexxZr<sup>®</sup> Tool U



是高性能牙科銑刀,由優質合金製成,具有超鋒利的切削刃。

優化的切削刃和容屑槽幾何形狀非常適合加工氧化鋯、PMMA 和蠟。使用在硬質和軟質 CAD/CAM 材料均可獲得極其光滑的表面。NexxZr Tool U 以其鋒利的切削刃、良好的使用壽命和極具吸引力的性價比讓用戶信服。

## 技術參數



類型  
雙刃半徑銑刀



材料  
優質合金



刀刃銳度  
超鋒利



適用於  
氧化鋯、PMMA、蠟




使用壽命  
超過 120 個 ZrO<sub>2</sub>  
單位\*

# 1 具有超鋒利切削刃的優質 合金銑刀 使用在硬質和軟質 CAD/CAM 材料實現極其光滑的表面和良好的使用壽命



NexxZr Tool U 銑刀  
通過高質量的研磨工  
藝, 產生光滑、超鋒利  
的切削刃

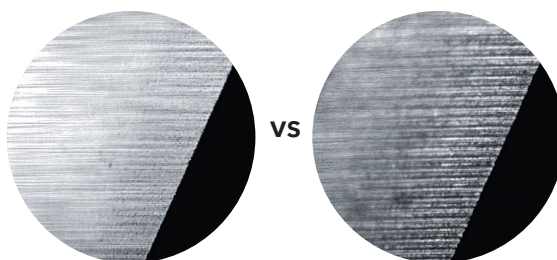

常規銑刀  
傳統磨削工藝產生  
的粗糙、不均勻的切  
削刃

# 2 優化的切削刃和切屑空間幾何形狀 ZrO<sub>2</sub>、PMMA 和蠟的精細研磨效果



CAD代表切削刃和切屑空  
間幾何圖形的



ZrO<sub>2</sub>



PMMA



Wax

# 3 具吸引力的性價比 經濟實惠和高穩定度生產流程

超過 120 個 ZrO<sub>2</sub> 單位\*



\* 內部 Sagemax 測試結果

## 包裝



## 其他頂級產品



### NexxZr D

高性能牙科銼刀由優質硬質合金製成的,帶有超硬納米晶體金剛石塗層



### NexxZr+ Multi

具有自然美感的多層氧化鋯



### PMMA Disc Multi

高度交聯的聚甲基丙烯酸甲酯,具有集成色度梯度),用於CAD/CAM 製造的臨時修復體



### Wax Disc

用於CAD/CAM 製造的合成蠟盤

### Manufacturer

**Sagemax Bioceramics, Inc.**

34210 9th Ave. South, Suite 118

Federal Way, WA 98003, USA

E: info@sagemax.com

sagemax.com